

Θεραπεία άσκησης πίεσης

Επίδεσμοι άσκησης πίεσης χαμηλής έκτασης

Οι ταινίες άσκησης πίεσης χαμηλής έκτασης δεν διαθέτουν ιδιαίτερη ελαστικότητα και ως επίδεσμοι προσφέρουν ισχυρή συμπίεση με υψηλή πίεση λειτουργίας και χαμηλή στατική πίεση. Ως πίεση λειτουργίας χαρακτηρίζεται η αντίσταση που ασκεί ο επίδεσμος στο μυϊκό σύστημα. Η στατική πίεση είναι η δύναμη που απαιτείται για το τέντωμα του επιδέσμου κατά την τοποθέτηση.

Επίδεσμοι από ταινίες μικρής έλκυσης είναι κατάλληλοι για όλες τις οξείες και χρόνιες μορφές φλεβικών παθήσεων των κάτω άκρων και επιπλέον ενδείκνυται σε περίπτωση τραυματισμών του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος.

Επίδεσμοι άσκησης πίεσης υψηλής έκτασης

Οι επίδεσμοι υψηλής έκτασης ασκούν χάρη στην υψηλή ελαστικότητά τους μία ομοιόμορφη συνεχή πίεση, ενώ η συμπίεση είναι σχετικά χαμηλή, και μεγάλη στατική πίεση. Ενδείκνυται για την αποθεραπεία και την προφύλαξη από παθήσεις των ποδιών καθώς και κατά τη διάρκεια της ημέρας για την ενίσχυση της πίεσης που ασκούν οι επίδεσμοι από υφασμάτινες ελαστικές ταινίες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για λειτουργικούς επιδέσμους ως επίδεσμοι στήριξης και ανακούφισης σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος

Χάρη στη μεγάλη τους ελαστικότητα οι επίδεσμοι άσκησης πίεσης μεγάλης έλκυσης εφαρμόζουν καλά και έτσι είναι εύκαμπτοι και σταθεροί.

Επίδεσμοι ψευδαργύρου

Οι επίδεσμοι ψευδαργύρου όταν τοποθετηθούν είναι ημισκληροί και εύκαμπτοι. Λόγω της έλλειψης ελαστικότητας μπορούν να ασκούν μέγιστη αντίσταση στο μυϊκό σύστημα και κατ' αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν έντονη συμπίεση, που φτάνει μέχρι τις περιοχές βάθους επιτρέποντας τη γρήγορη και καλή κυκλοφορία του αίματος.

Οι επίδεσμοι ψευδαργύρου είναι απαραίτητοι για την καλή κυκλοφορία του αίματος σε περιπτώσεις οίδημάτων στα πόδια και για την καταπολέμηση των επίμονων οίδημάτων. Ως μόνιμος επίδεσμος ενδείκνυται για τη διατήρηση της επιθυμητής καλής κυκλοφορίας του αίματος. Στη γενική ορθοπεδική και την ορθοπεδική αποθεραπεία χρησιμοποιείται ως επίδεσμος υποστήριξης.

Αντιθρομβωτικές κάλτσες

Τα μέτρα προφύλαξης από τις θρομβώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μία εγχείριση αποτελούν πλέον συνήθη πρακτική στην ιατρική.

Οι κάλτσες Cambren C έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή πορεία της συμπίεσης από το ανώτερο έως το κατώτερο σημείο. Η πίεση συμπίεσης στην περιοχή του μεσοκύνιου ανέρχεται σε 18 mm Hg και επαρκεί για να αυξήσει την ταχύτητα ροής του αίματος σε κληνίρεις ασθενείς και να προωθήσει την παλινδρόμησή του προς την καρδιά.



Επίδεσμοι χαμηλής έκτασης	Σελ. 97
Επίδεσμοι υψηλής έκτασης	Σελ. 103
Επίδεσμοι ψευδαργύρου	Σελ. 105
Αντιθρομβωτικές κάλτσες	Σελ. 107



HARTMANN Ideal Bandages

Επίδεσμοι ελαστικοί τύπου Ideal

η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 90%. Προσφέρει καλή συμπίεση με μικρή πίεση σε φυσική κατάσταση. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει και ενώ βρίσκονται σε φυσική κατάσταση. Μπορούν να πλυθούν στους 100 °C, μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό 134 °C). Η ελαστικότητα των επίδεσμων που μειώνεται κατά την εφαρμογή τους επανέρχεται με το πλύσιμο. Διατίθενται σε δύο τύπους.

100% βαμβάκι

Για την άσκηση έντονης πίεσης σε περιπτώσεις χρόνιων φλεβικών οιδημάτων εκ στάσεως, σε περιπτώσεις ulcus cruris, θρομβοφλεβίτιδας, για την προφύλαξη και τη θεραπεία ασθενειών των φλεβών, για την προεγχειρητική, εγχειρητική και μετεγχειρητική προστασία από θρόμβωση. Χρησιμοποιούν επίσης ως επίδεσμοι στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικοί επίδεσμοι.



Είδη

μήκος 5 m. (τεντωμένο)
σε ατομική συσκευασία

DIN 61632-10-5

Γωνίες με συρτοθηλειά
(με λεύκανση)

Μεγέθη

Κωδικός

Μονάδα

Μονάδες/Κιβώτιο

Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
4 cm	931 011	1 επίδεσμος	100
6 cm	931 012	1 επίδεσμος	70
8 cm	931 013	1 επίδεσμος	55
10 cm	931 014	1 επίδεσμος	60
12 cm	931 015	1 επίδεσμος	50
15 cm	931 016	1 επίδεσμος	45
20 cm	931 017	1 επίδεσμος	30
30 cm	931 018	1 επίδεσμος	15



DIN 61632-IB-W

Με υφασμένες γωνίες,
(χωρίς λεύκανση)

Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
4 cm	931 001	1 επίδεσμος	100
6 cm	931 003	1 επίδεσμος	70
8 cm	931 004	1 επίδεσμος	55
10 cm	931 005	1 επίδεσμος	60
12 cm	931 006	1 επίδεσμος	50
15 cm	931 007	1 επίδεσμος	45
20 cm	931 008	1 επίδεσμος	30
30 cm	931 010	1 επίδεσμος	15

DIN 61632-IB-S

Γωνίες με συρτοθηλειά
(με λεύκανση)
με συνδετήρες

Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
6 cm	931 755	1 επίδεσμος	200
8 cm	931 756	1 επίδεσμος	250
10 cm	931 757	1 επίδεσμος	200
12 cm	931 758	1 επίδεσμος	100
15 cm	931 759	1 επίδεσμος	50
20 cm	931 760	1 επίδεσμος	35
30 cm	931 761	1 επίδεσμος	12

Επίδεσμοι χαμηλής έκτασης



Idealast®

Επίδεσμοι ελαστικοί τύπου Ideal

χαμηλής έκτασης. Η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 80%. Ο επίδεσμος δεν χάνει τη συνεκτικότητά με την εφαρμογή του πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ενοχλητικά νήματα. Προσφέρει καλή συμπίεση με χαμηλή πίεση σε φυσική κατάσταση. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και ενώ βρίσκονται σε φυσική κατάσταση. Πλένονται σε έως και 60 °C, μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό 134 °C). Είναι ιδιαίτερα οικονομικοί χάρη στην μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Διατίθενται σε λευκό χρώμα.

69% βαμβάκι, 31% πολυαμίδιο.

Άσκηση πίεσης μέσης ισχύος για την προφύλαξη και τη θεραπεία ασθενειών στις φλέβες. Ως επίδεσμος στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος. Χρησιμοποιείται ως συμπιεστικός επίδεσμος τραύματος και για την κάλυψη του νάρθηκα.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο) σε ατομική συσκευασία	6 cm	931 153	1 επίδεσμος	70
	8 cm	931 154	1 επίδεσμος	55
	10 cm	931 155	1 επίδεσμος	60
	12 cm	931 156	1 επίδεσμος	50
	15 cm	931 157	1 επίδεσμος	45
	20 cm	931 158	1 επίδεσμος	30



Idealast® -haft

Επίδεσμοι αυτοσυγκρατούμενοι ελαστικοί τύπου Ideal

κατά μήκος, η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 90%. Προσφέρουν αμφίπλευρη, αυτοσυγκρατούμενη πρόσφυση για αντιολισθητική εφαρμογή. Καλή συμπίεση με μικρή πίεση σε φυσική κατάσταση. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει και ενώ βρίσκονται σε φυσική κατάσταση. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Μπορούν να αποστειρωθούν. Είναι ακτινοδιαπερατοί.

93% βαμβάκι, 5% πολυαμίδιο, 2% πολυουρεθάνη, με επικάλυψη κυψελίδων λάτεξ.

Άσκηση πίεσης μέσης ισχύος για την προφύλαξη και τη θεραπεία ασθενειών στις φλέβες. Ως επίδεσμος στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος. Χρησιμοποιείται ως συμπιεστικός επίδεσμος τραύματος και για την κάλυψη του νάρθηκα.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 4 m</u> (τεντωμένο)	6 cm	931 110	1 επίδεσμος	40
	8 cm	931 111	1 επίδεσμος	40
	10 cm	931 112	1 επίδεσμος	40
	12 cm	931 113	1 επίδεσμος	40
<u>μήκος 10 m</u> (τεντωμένο)	6 cm	931 114	1 επίδεσμος	20
	8 cm	931 115	1 επίδεσμος	20
	10 cm	931 116	1 επίδεσμος	20
	12 cm	931 117	1 επίδεσμος	20



Idealflex®

Επίδεσμοι ελαστικοί τύπου Ideal

με ελαστικότητα της τάξης του 90% περίπου, φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντάς του να αναπνέει, πλένονται έως και στους 60° C, μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό 134 °C).

45% πολυεστέρας, 42% βαμβάκι, 13% βισκόζη

Για τη στερέωση επιδέσμων τραυμάτων, ιδιώς σε αρθρώσεις. Χρησιμοποιούνται και ως επίδεσμοι στήριξης για τη μετέπειτα φροντίδα διαστρεμμάτων, εξάρθρωσεων, θλάσεων και καταγμάτων καθώς και ως αθλητικοί επίδεσμοι.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο) ατομική συσκευασία	6 cm	931 290	1 επίδεσμος	80
	8 cm	931 291	1 επίδεσμος	60
	10 cm	931 292	1 επίδεσμος	50
	12 cm	931 293	1 επίδεσμος	40
	15 cm	931 294	1 επίδεσμος	30
	20 cm	931 295	1 επίδεσμος	20
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο)	6 cm	931 283	10 επίδεσμοι	8
	8 cm	931 284	10 επίδεσμοι	6
	10 cm	931 285	10 επίδεσμοι	5
	12 cm	931 286	10 επίδεσμοι	4
	15 cm	931 287	10 επίδεσμοι	3
	20 cm	931 288	10 επίδεσμοι	2



Idealflex® Universal

Επίδεσμοι ελαστικοί τύπου Ideal

με υφασμένα άκρα, ελαστικότητα της τάξης του 85% περίπου, φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντάς του να αναπνέει, δεν μεταπορίζονται, πλένονται έως και στους 40° C.

Χρησιμοποιούνται ως επίδεσμοι στήριξης και ανακούφισης, καθώς και ως αθλητικοί επίδεσμοι, ως συμπιεσμένοι επίδεσμοι τραύματος και ως νάρθηκες.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο) ατομική συσκευασία	6 cm	931 321	1 επίδεσμος	250
	8 cm	931 322	1 επίδεσμος	200
	10 cm	931 323	1 επίδεσμος	240
	12 cm	931 324	1 επίδεσμος	200
	15 cm	931 325	1 επίδεσμος	160
	20 cm	931 326	1 επίδεσμος	100
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο)	6 cm	931 271	10 επίδεσμοι	28
	8 cm	931 272	10 επίδεσμοι	18
	10 cm	931 273	10 επίδεσμοι	21
	12 cm	931 274	10 επίδεσμοι	23
	15 cm	931 275	10 επίδεσμοι	18
	20 cm	931 276	10 επίδεσμοι	8

Επίδεσμοι χαμηλής έκτασης



Pütterbinde®

Επίδεσμοι ελαστικοί και εξαιρετικά δυνατοί, μικρού μήκους

για χρήση στην τεχνική επίδεσης αντίθετης φοράς τύπου Pütter, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας πιεστικής επίδεσης κατά την αντιμετώπιση φλεβικών παθήσεων στα πόδια. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται δύο εξαιρετικά δυνατοί ελαστικοί επίδεσμοι μικρού μήκους, οι αποκαλούμενοι επίδεσμοι Pütter. Κατά περίπτωση διατίθενται ως επίδεσμοι Pütter (Pütterbinde) σε διπλή συσκευασία καθώς και σε μονή συσκευασία σε διαφορετικά πλάτη.

Το δυνατό, ελαστικό ύφασμα των επιδέσμων Pütter, με ελαστικότητα περ. 90 %, επιτυγχάνει ισχυρή συμπίεση ασκώντας υψηλή πίεση κατά την κίνηση και χαμηλή πίεση κατά την κατάσταση ηρεμίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να έχουν θεραπευτική δράση ακόμη και στις βαθύτερες, υποπεριτονιακές φλεβικές περιοχές. Ο συνδυασμός της τεχνικής επίδεσης αντίθετης φοράς και της μεγάλης ισχύος των επιδέσμων καθιστά τους επιδέσμους εξαιρετικά ανθεκτικούς παρέχοντας πιεστική δράση διάρκειας.

Προκειμένου να προσαρμόζονται οι επίδεσμοι στη μείωση της περιμέτρου του ποδιού σε περίπτωση υποχώρησης του οιδήματος, εκτός από περιπτώσεις οξέος και προχωρημένου οιδήματος, μπορούν να διατηρούνται για περίπου τρεις ημέρες. Οι επίδεσμοι Pütter κατασκευάζονται από 100 % βαμβάκι. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, δεν προκαλούν ερεθισμούς, είναι σταθεροί στο βράσιμο και αποστειρώνονται (σε ατμό 134 °C).

Για πολύ ισχυρή συμπίεση, μετά από σκληρυντική θεραπεία κρισών, για όλες τις περιπτώσεις οξέων και χρόνιων οιδημάτων φλεβικής θρόμβωσης, Ulcera cruris και θρομβοφλεβίτιδας.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο) σε ατομική συσκευασία	6 cm	931 807	1 επίδεσμος	40
	8 cm	931 808	1 επίδεσμος	40
	10 cm	931 810	1 επίδεσμος	40
	12 cm	931 812	1 επίδεσμος	60
<u>μήκος 5 m.</u> (τεντωμένο)	6 cm	931 806	10 επίδεσμοι	8
	8 cm	931 814	10 επίδεσμοι	8
	10 cm	931 815	10 επίδεσμοι	8
	12 cm	931 816	10 επίδεσμοι	8



Idealast® color cohesive

Επίδεσμοι αυτοσυγκρατούμενοι ελαστικοί (έγχρωμοι)

κατά μήκος, η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 90 %. Προσφέρουν αμφίπλευρη, αυτοσυγκρατούμενη πρόσφυση για αντιολισθητική εφαρμογή. Καλή συμπίεση με μικρή πίεση σε φυσική κατάσταση. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει και ενώ βρίσκονται σε φυσική κατάσταση. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Μπορούν να αποστειρωθούν. Είναι ακτινοδιαπερατοί. Διατίθενται σε τρία χρώματα.

66% βαμβάκι, 32% πολυαμίδιο, 2% πολυουρεθάνη, με επικάλυψη κυψελίδων λάτεξ.

Άσκηση πίεσης μέσης ισχύος για την προφύλαξη και τη θεραπεία ασθενειών στις φλέβες. Ως επίδεσμος στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος. Χρησιμοποιείται ως συμπιεστικός επίδεσμος τραύματος και για την κάλυψη του νάρθηκα, καθώς και ως κομψό προστατευτικό μέσο για επίδεση κάθε είδους.



Είδη Μεγέθη Κωδικός Μονάδα Μονάδες/Κιβώτιο
μήκος 4 m. (τεντωμένο)

μπλε

4 cm	931 180	1 επίδεσμος	48
6 cm	931 181	1 επίδεσμος	48
8 cm	931 182	1 επίδεσμος	24
10 cm	931 183	1 επίδεσμος	24

κόκκινοι

4 cm	931 185	1 επίδεσμος	48
6 cm	931 186	1 επίδεσμος	48
8 cm	931 187	1 επίδεσμος	24
10 cm	931 188	1 επίδεσμος	24

πράσινοι

4 cm	931 190	1 επίδεσμος	48
6 cm	931 191	1 επίδεσμος	48
8 cm	931 192	1 επίδεσμος	24
10 cm	931 193	1 επίδεσμος	24

με χρωματική κατανομή 5 μπλε, 3 κόκκινοι, 2 πράσινοι

4 cm	931 195	10 επίδεσμοι	15
6 cm	931 196	10 επίδεσμοι	12
8 cm	931 197	10 επίδεσμοι	9
10 cm	931 198	10 επίδεσμοι	6



Επίδεσμοι χαμηλής έκτασης



Idealplast®

Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί

με κατά μήκος ελαστικότητα. Η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 60%. Προσφέρουν καλή συμπίεση με μικρή πίεση σε φυσική κατάσταση. Διαθέτουν πολύ ισχυρή συγκολλητική ισχύ, η οποία διατηρείται και έπειτα από μακρόχρονη εφαρμογή. Αντιολισθητικοί, δεν μετατίθενται με αποτέλεσμα να προσφέρουν για παράδειγμα στις αρθρώσεις και τους μύες ασφαλή σταθεροποίηση και ανακούφιση. Διατίθενται στο χρώμα του δέρματος.

100% βαμβάκι, με συγκολλητικό υλικό από οξείδιο του ψευδαργύρου και καουτσούκ.

Για την άσκηση έντονης πίεσης ως μόνιμοι επίδεσμοι σε περιπτώσεις φλεβικής ή λεμφικής ανεπάρκειας, π.χ. σε περιπτώσεις επιφανειακής θρομβοφλεβίτιδας, για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση της θεραπείας της φλεβίτιδας σε περιπτώσεις σκληρυντικής διήθησης των κισών, σε περιπτώσεις ulcera cruris και λεμφωμάτων. Χρησιμοποιείται ως ανακουφιστικός επίδεσμος σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος, π.χ. σε θλάσεις, διαστρέμματα κλπ. Για επιδέσμους αποκατάστασης.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Idealplast μήκος 2,5 m, σε ατομική συσκευασία	6 cm	512 413	1 επίδεσμος	60
	8 cm	512 414	1 επίδεσμος	40
	10 cm	512 415	1 επίδεσμος	40
Idealplast E μήκος 2,7 m, σε ατομική συσκευασία	5 cm	512 421	1 επίδεσμος	50
	7,5 cm	512 422	1 επίδεσμος	50
	10 cm	512 423	1 επίδεσμος	50



Hypolastic®

Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί υποαλλεργικοί

με κατά μήκος ελαστικότητα. Η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 60%. Προσφέρουν καλή συμπίεση με μικρή πίεση σε φυσική κατάσταση. Χάρη στην ιδιότητά τους να είναι ανεκτοί από το δέρμα ενδείκνυνται ιδιαίτερα για ασθενείς με ευαίσθητα δέρματα. Διαθέτουν αξιόπιστη συγκολλητική ισχύ. Αντιολισθητικοί, δεν μετατίθενται. Είναι θερμοσταθεροί. Διατίθενται στο χρώμα του δέρματος.

100% βαμβάκι, με πολυακρυλικό υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό.

Για την άσκηση έντονης πίεσης ως μόνιμοι επίδεσμοι σε περιπτώσεις φλεβικής ή λεμφικής ανεπάρκειας, π.χ. σε περιπτώσεις επιφανειακής θρομβοφλεβίτιδας, για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση της θεραπείας της φλεβίτιδας σε περιπτώσεις σκληρυντικής διήθησης των κισών, σε περιπτώσεις ulcera cruris και λεμφωμάτων. Χρησιμοποιείται ως ανακουφιστικός επίδεσμος σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος, π.χ. σε θλάσεις, διαστρέμματα, σε μυϊκές βλάβες καθώς και σε βλάβες των συνδέσμων και των τενόντων. Για ορθοπεδική εφαρμογή.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 2,5 m,</u> σε ατομική συσκευασία	6 cm	512 403	1 επίδεσμος	60
	8 cm	512 404	1 επίδεσμος	40
	10 cm	512 405	1 επίδεσμος	40



Lastohaft®

Επίδεσμοι αυτοσυγκρατούμενοι ελαστικοί υψηλής έκτασης

ελαστικοί κατά μήκος, η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 170 %. Προσφέρουν αμφίπλευρη πρόσφυση για αντιολισθητική εφαρμογή. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, μπορούν να αποστειρωθούν. Είναι ακτινοδιαπερατοί. Διατίθενται στα χρώματα του δέρματος.

80% βαμβάκι, 16% πολυαμίδιο, 4% πολυουρεθάνη με επικάλυψη κυψελίδων λάτεξ.

Για την άσκηση πίεσης μέσης έντασης ως επίδεσμος στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος.



Είδη Μεγέθη Κωδικός Μονάδα Μονάδες/Κιβώτιο

μήκος 5 m, (τεντωμένο)
σε ατομική συσκευασία

6 cm	932 400	1 επίδεσμος	40
8 cm	932 401	1 επίδεσμος	40
10 cm	932 402	1 επίδεσμος	40
12 cm	932 403	1 επίδεσμος	20



Lastodur® soft

Επίδεσμοι ελαστικοί υψηλής έκτασης

ελαστικοί κατά μήκος, η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 170 %. Προσφέρουν καλή κατανομή της συμπίεσης για εύκαμπτους σταθερούς επιδέσμους. Είναι ιδιαίτερα διακριτικοί από αισθητική άποψη. Τοποθετούνται σε φυσική κατάσταση. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και είναι καλά ανεκτός. Ανθεκτικοί στο χρόνο, πλένονται σε έως και 60 °C, μπορούν να αποστειρωθούν (ατμός 134 °C). Διατίθενται στο χρώμα του δέρματος.

82% βαμβάκι, 13% πολυαμίδιο, 5% ελαστάν.

Για την άσκηση ελαφρότερης πίεσης ως επίδεσμος στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος.



Είδη Μεγέθη Κωδικός Μονάδα Μονάδες/Κιβώτιο

μήκος 7 m, (τεντωμένο)
σε ατομική συσκευασία
με συνδετήρες

6 cm	931 653	1 επίδεσμος	60
8 cm	931 654	1 επίδεσμος	60
10 cm	931 655	1 επίδεσμος	60
12 cm	931 656	1 επίδεσμος	30

μήκος 7 m, (τεντωμένο)
σε κουτί

6 cm	931 635	10 επίδεσμοι	16
8 cm	931 636	10 επίδεσμοι	8
10 cm	931 637	10 επίδεσμοι	12
12 cm	931 638	10 επίδεσμοι	8

Επίδεσμοι υψηλής έκτασης



Lastodur® strong

Επίδεσμοι ελαστικοί υψηλής έκτασης

η ελαστικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 180 %. Προσφέρουν καλή κατανομή της συμπίεσης για εύκαμπτους σταθερούς επίδεσμούς. Τοποθετούνται σε φυσική κατάσταση. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και είναι καλά ανεκτοί. Ανθεκτικοί στο χρόνο, πλένονται σε έως και 60 °C, μπορούν να αποστειρωθούν (ατμός 134 °C). Διατίθενται στο χρώμα του δέρματος.

85% βαμβάκι, 8% πολυουρεθάνη, 7% πολυαμίδιο.

Για την έντονη συμπίεση ως επίδεσμος στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος. Ως επίδεσμος για τις αρθρώσεις χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ενδείξεις ο επίδεσμος μικρότερου μήκους.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
------	--------	---------	--------	-----------------

Με συνδετήρες

μήκος 7 m. (τεντωμένο)
σε ατομική συσκευασία

6 cm	931 663	1 επίδεσμος	60
8 cm	931 664	1 επίδεσμος	60
10 cm	931 665	1 επίδεσμος	60
12 cm	931 666	1 επίδεσμος	30
20 cm	931 668	1 επίδεσμος	20

μήκος 14 m. (τεντωμένο)
σε ατομική συσκευασία

10 cm	931 629	1 επίδεσμος	20
-------	---------	-------------	----

μήκος 7 m. (τεντωμένο)
σε κουτί

6 cm	931 631	10 επίδεσμοι	20
8 cm	931 632	10 επίδεσμοι	18
10 cm	931 633	10 επίδεσμοι	12
12 cm	931 634	10 επίδεσμοι	10



HARTMANN Verbandklammern

Συνδετήρες επιδέσμων

με ελαστική ταινία από καουτσούκ στα άκρα της οποίας συνδέονται σταθερά και άκαμπτα μεταλλικά γαντζάκια. Τα μεταλλικά άκρα των συνδετήρων είναι και αυτά βαμμένα στο χρώμα του δέρματος.

Για γρήγορη και ασφαλή στερέωση επιδέσμων.

Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
------	--------	---------	--------	-----------------

Λευκό		939 620	50 τεμάχια	60
-------	--	---------	------------	----

Χρώμα δέρματος		939 621	50 τεμάχια	60
----------------	--	---------	------------	----



Varolast®

Επίδεσμοι ελαστικοί ψευδαργύρου

τόσο με κατά μήκος όσο και κατά πλάτος ελαστικότητα, έτοιμοι προς χρήση. Χάρη στη δυνατότητά τους να διαμορφώνονται και από τις δύο διαστάσεις, λόγω της ύφανσής τους, είναι δυνατή η ακριβής τοποθέτηση των επίδεσμων και σε δύσκολα προσβάσιμα ανατομικά σημεία χωρίς να είναι απαραίτητη η κοπή τους. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται διαρκώς η μείωση της πίεσης από το ανώτερο στο κατώτερο σημείο. Καλά ανεκτοί από το δέρμα. Στεγνώνουν γρήγορα.

Για την καλή κυκλοφορία του αίματος και για την καταπολέμηση των επίμονων οιδημάτων. Ως συμπιεσμένος μόνιμος επίδεσμος για περιπτώσεις φλεβίτιδας σε βαθιές και επιφανειακές φλέβες, για μεταθρομβωτικές καταστάσεις, για έλκη εκ κατακλίσεως που δεν βρίσκονται σε υγρή φάση. Ως επίδεσμος υποστήριξης στη γενική ορθοπεδική και την ορθοπεδική αποθεραπεία.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος έως 5 m, 7 m και 10 m, (τεντωμένοι)</u> σε ατομική συσκευασία	10 cm x 5 m	931 574	1 επίδεσμος	16
	10 cm x 7 m	931 573	1 επίδεσμος	20
	10 cm x 10 m	931 575	1 επίδεσμος	20
σε ατομική συσκευασία, σε κούτα	10 cm x 5 m	931 576	16 επίδεσμοι	1
	10 cm x 7 m	931 577	20 επίδεσμοι	1
	10 cm x 10 m	931 578	20 επίδεσμοι	1



Varolast® Plus

Επίδεσμοι ελαστικοί ψευδαργύρου

κατά μήκος ελαστικοί, ιδιαίτερα υδατικοί, με πολύ μαλακό, ισούψές επίθεμα κόλλας ψευδαργύρου, έτοιμοι προς χρήση. Χάρη στην ελαστικότητα της ύφανσής τους είναι δυνατή η χωρίς προβλήματα τοποθέτηση των επίδεσμων χωρίς να είναι απαραίτητη η κοπή τους. Καλά ανεκτοί από το δέρμα.

Για την καλή κυκλοφορία του αίματος και για την καταπολέμηση των επίμονων οιδημάτων. Ως συμπιεσμένος μόνιμος επίδεσμος για περιπτώσεις φλεβίτιδας σε βαθιές και επιφανειακές φλέβες, για μεταθρομβωτικές καταστάσεις, για έλκη εκ κατακλίσεως που δεν βρίσκονται σε υγρή φάση. Ως επίδεσμος υποστήριξης στη γενική ορθοπεδική και την ορθοπεδική αποθεραπεία.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος έως 5 m, 7 m και 10 m, (τεντωμένοι)</u> σε ατομική συσκευασία	8 cm x 5 m	931 582	1 επίδεσμος	16
	10 cm x 7 m	931 583	1 επίδεσμος	20
	10 cm x 10 m	931 585	1 επίδεσμος	20
σε ατομική συσκευασία, σε κούτα	8 cm x 5 m	931 589	16 επίδεσμοι	1
	10 cm x 7 m	931 587	20 επίδεσμοι	1
	10 cm x 10 m	931 588	20 επίδεσμοι	1

Επίδεσμοι ψευδαργύρου



Varix®

Επίδεσμοι ψευδαργύρου

άκαμπτοι, με βάση επιδέσμους γάζας, έτοιμοι προς χρήση. Καλά ανεκτοί από το δέρμα. Στεγνώνουν γρήγορα.

Για την καλή κυκλοφορία του αίματος και για την καταπολέμηση των επίμονων οιδημάτων. Ως συμπιεσμένος μόνιμος επίδεσμος για περιπτώσεις φλεβίτιδας σε βαθιές και επιφανειακές φλέβες, για μεταθρομβωτικές καταστάσεις, για έλκη εκ κατακλίσεως που δεν βρίσκονται σε υγρή φάση. Ως επίδεσμος υποστήριξης στη γενική ορθοπεδική και την ορθοπεδική αποθεραπεία.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
σε ατομική συσκευασία	10 cm x 5 m	350 425	1 επίδεσμος	45
	10 cm x 7 m	350 435	1 επίδεσμος	40
	10 cm x 10 m	350 445	1 επίδεσμος	40



Ideal-Varix®


Επίδεσμοι ελαστικοί ψευδαργύρου

με βάση επιδέσμους ideal, έτοιμοι προς χρήση. Χάρη στην ελαστικότητα της ύφανσής τους είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτησή τους. Καλά ανεκτοί από το δέρμα. Στεγνώνουν γρήγορα.

Για την καλή κυκλοφορία του αίματος και για την καταπολέμηση των επίμονων οιδημάτων. Ως συμπιεσμένος μόνιμος επίδεσμος για περιπτώσεις φλεβίτιδας σε βαθιές και επιφανειακές φλέβες, για μεταθρομβωτικές καταστάσεις, για έλκη κατακλίσεως που δεν βρίσκονται σε υγρή φάση. Ως επίδεσμος υποστήριξης στη γενική ορθοπεδική και την ορθοπεδική αποθεραπεία.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 5 m</u> , (τεντωμένος) σε ατομική συσκευασία	8 cm x 5 m	351 424	1 επίδεσμος	18

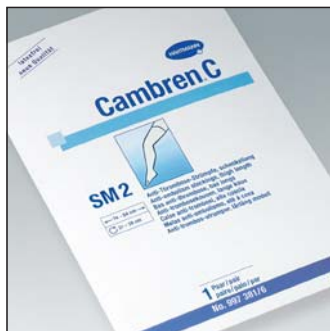

Cambren® C

Κάλτσες αντιθρομβωτικές

για την εξισοροπημένη κατανομή της πίεσης. Είναι κλειστές στο μπροστά μέρος διαθέτουν όμως οπή ελέγχου και πλεκτή φτέρνα. Φέρουν περιμετρικά ελαστική ταινία στερέωσης στο γοφό για να αποφεύγεται η ολίσθηση της κάλτσας. Υφασμένες λωρίδες χρώματος για επισήμανση του μεγέθους. Χωρίς λάτεξ, επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα & προσφέρουν άνετη εφαρμογή. Είναι ανθεκτικές και μπορούν να πλυθούν στους 100 °C.

Για την προεγχειρητική, εγχειρητική και μετεγχειρητική προστασία από θρόμβωση ή εμβολή.



Μέγεθος	Γάμπα	Μήκος ποδιού	Περίμετρος μηρού
K 1	max. 31 cm		
K 2	31-38 cm		
K 3	min. 38 cm		
SK 1	max. 31 cm	max. 74 cm	
SK 2	max. 31 cm	74-84 cm	
SK 3	max. 31 cm	min. 84 cm	
SM 1	31-38 cm	max. 74 cm	
SM 2	31-38 cm	74-84 cm	
SM 3	31-38 cm	min. 84 cm	
SG 1	min. 38 cm	max. 74 cm	
SG 2	min. 38 cm	74-84 cm	
SG 3	min. 38 cm	min. 84 cm	
H 1	max. 31 cm	min. 72 cm	max. 64 cm
H 2	31-38 cm	min. 72 cm	max. 64 cm
H 3	min. 38 cm	min. 72 cm	max. 64 cm
H 4	min. 38 cm	min. 72 cm	64-82 cm



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Κάτω γόνατος</u>				
Small	K 1	997 370	1 ζευγάρι	12
Medium	K 2	997 371	1 ζευγάρι	12
Large	K 3	997 372	1 ζευγάρι	12
<u>Άνω γόνατος</u>				
Small	SK 1	997 375	1 ζευγάρι	12
	SK 2	997 376	1 ζευγάρι	12
	SK 3	997 377	1 ζευγάρι	12
Medium	SM 1	997 380	1 ζευγάρι	12
	SM 2	997 381	1 ζευγάρι	12
	SM 3	997 382	1 ζευγάρι	12
Large	SG 1	997 385	1 ζευγάρι	12
	SG 2	997 386	1 ζευγάρι	12
	SG 3	997 387	1 ζευγάρι	12
<u>Ριζομηρίου</u>				
Small	H 1	997 390	1 ζευγάρι	6
Medium	H 2	997 391	1 ζευγάρι	6
Large	H 3	997 392	1 ζευγάρι	6
Extra Large	H 4	997 393	1 ζευγάρι	6

